

Pins & Adapter

Zur präzisen Befestigung von Schnittblöcken



Pins & Adapter

Anwendungsbereiche

Stabile Fixierung und hohe Präzision

Unsere Pins ermöglichen eine feste und präzise Fixierung von Schnittblöcken am Knochen

Minimale Bewegung

Durch die direkte Verankerung im Knochen bieten Pins eine hohe Resistenz gegen Verschiebung oder Lockerung, selbst bei längeren Operationen oder bei mechanischer Belastung

Wiederverwendbar

Die Pins sind so konzipiert, dass sie mehrfach sterilisiert und wiederverwendet werden können. Sie lassen sich leicht einsetzen und entfernen, für einen effizienten OP-Ablauf


Biokompatible Materialien aus Stahl

Einfache Handhabung

schneller Einsatz und Entfernung durch einfaches herausziehen

Anwendungsbereiche von Pins

- Orthopädie
- Traumatologie

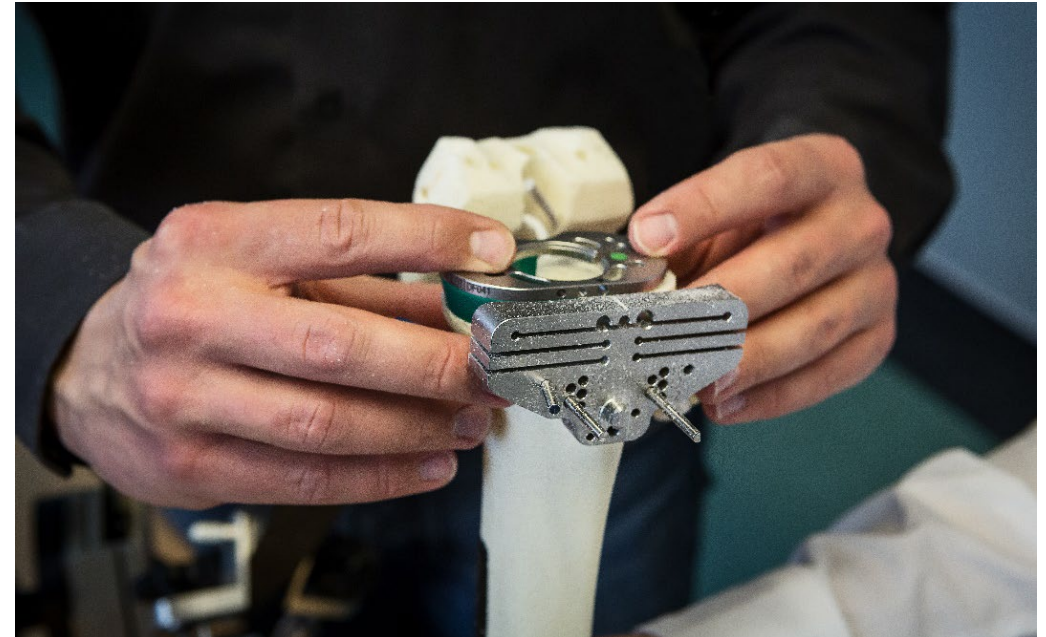

Pins & Adapter

Fixierung mit Pins ohne vorheriges Bohren

Die Einschlagpins können direkt in den Knochen eingebracht werden ohne vorheriges Bohren.

Standardmäßig in Ø3,2 und Ø2,4

Pins Ø3,2



514-016 Pin-Einschläger für Ø3,2



482-556 Pin-Adapter 3,2 zum Einbohren



514-006 Pin Ø3,2x50



482-558 Pin Ø3,2x70



514-018 Kopfpin Ø3,2x45

Pins Ø2,4



482-557 Pin-Adapter 2,4 Zimmer-Anschluss



482-553 Pin Ø2,4x80

Verfügbar in verschiedenen Ausführungen.
Jetzt anfragen und testen!

Pins & Adapter

Bohrpin und Adapter

Bei sklerotischen Knochen werden Bohrpins (Drill-Pins) zum befestigen von Schnittblöcken bevorzugt.

Die **integrierte Magnetfunktion** sorgt für sicheren Halt und ermöglicht den schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Bohrpins im praktischen Schnellwechselsystem.

Vorteile auf einen Blick:

Selbstzentrierende Konstruktion unterstützt präzises Ansetzen

Optimierte Geometrie für leichtgängiges Bohren

Hohe Rundlaufgenauigkeit für stabile Führung und präzise Ausrichtung



482-833-Z Bohrpins-Adapter Zimmer-Anschluss



482-834-5 Bohrpins Ø3,2x90



Pins & Adapter

Pin-Extraktor

Für zuverlässige Entfernung von Pins bei chirurgischen Eingriffen

- **Praktischer Ein-Hand Griffmechanismus**
- **Wiederverwendbar**

Kompatibel mit gängigen Pin-Systemen und Adaptern
für Pin-Durchmesser 3,2 und 2,4



514-005 Pin-Extraktor

Pins & Adapter

Artikelliste

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stück pro Verpackungseinheit
514-016	Pin-Einschläger (für 514-006 und 482-558)	1
514-006	Pin Ø3,2x50	1
482-558	Pin Ø3,2x70	1
482-556	Pin Adapter Zimmer-Anschluss für 482-558	1
482-553	Pin Ø2,4x80	1
482-557	Pin-Adapter 2,4 Zimmer-Anschluss	1

Bohrpin und Adapter

482-834-5	Bohrpin Ø3,2x90	5
482-833-Z	Bohrpin-Adapter Zimmer-Anschluss	1

Pin-Extraktor

514-005	Pin Extraktor	1
---------	---------------	---

Kontakt & Bestellung



+49 3385 5420 0



sales@ohst.de



OHST Medizintechnik AG
Grünauer Fenn 3
14712 Rathenow
Germany

